
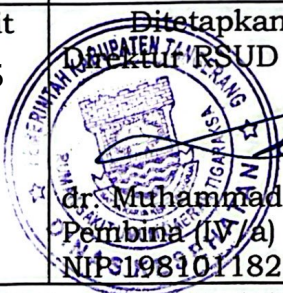


PENGUNAAN SYRINGE PUMP			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/195/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Ditetapkan oleh: Kepala RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (W/a) NIP.198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis syringe pump secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis syringe pump adalah alat yang berfungsi untuk memberikan cairan obat ke dalam tubuh pasien secara teratur dan dengan dosis yang presisi	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis syringe pump 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis syringe pump dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power pada stop kontak PLN 2. Siapkan syringe 3. Buka pintu alat kemudian pasang syringe pada alat 4. Tekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan alat 5. Lakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebelum dipasang ke pasien untuk membuang gelembung udara 6. Pilih mode sesuai kebutuhan mode Time atau Rate 7. Atur nilai sesuai kebutuhan 8. Tekan start untuk memulai 9. Jika sudah selesai tindakan, hentikan dengan menekan tombol STOP 10. Matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF 11. Apabila syringe pump mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	ICU, IGD, Keperawatan		