
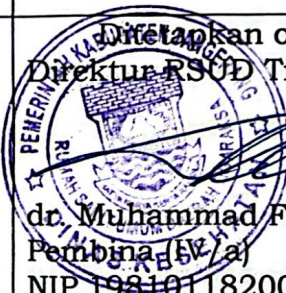


PENGUNAAN INFUSION PUMP			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/196/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (P/a) NIP 198101182009021002	
	Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis infusio pump secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis infusio pump adalah alat yang berfungsi untuk memberikan cairan, seperti obat-obatan atau nutrisi, ke dalam tubuh pasien secara terkontrol	
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis infusio pump 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis infusio pump dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power pada stop kontak PLN 2. Siapkan IV set 3. Buka pintu infusio pump kemudian pasang pada infusio pump lalu tutup pintu alat 4. Tekan tombol ON/OFF untuk menghidupkan alat 5. Lakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebelum dipasang ke pasien untuk membuang gelembung udara 6. Pilih mode sesuai kebutuhan mode Time atau Rate 7. Atur nilai sesuai kebutuhan 8. Tekan start untuk memulai infusio pump 9. Jika sudah selesai tindakan, hentikan dengan menekan tombol STOP 10. Matikan alat dengan menekan tombol ON/OFF 11. Apabila infusio pump mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	ICU, IGD, Keperawatan		