
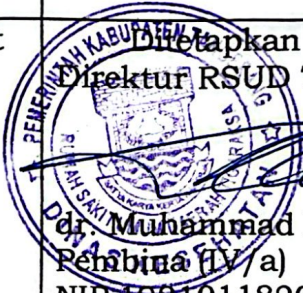


PENGUNAAN INFANT WARMER			
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/194/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	 Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa, dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (IV/a) NIP 198101182009021002	
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis Infant Warmer secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis infant warmer adalah untuk menjaga suhu tubuh bayi baru lahir pada rentang yang sesuai dengan suhu didalam rahim ibu, yaitu antara 34°C-37°C		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis Infant Warmer 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis infant warmer dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN 2. Untuk menghidupkan alat, tekan saklar ON/OFF 3. Setting suhu yang diinginkan dengan menekan ↑ atau ↓ 4. Diamkan alat selama sedikitnya 30 menit untuk melakukan Pre-Warming 5. Letakkan bayi pada matras 6. Untuk menyalakan waktu tindakan, tekan tombol Apgar 7. Tekan tombol reset pada infant warmer jika alarm berbunyi 8. Apabila infant warmer mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	IGD, Maternal, NICU, OK		