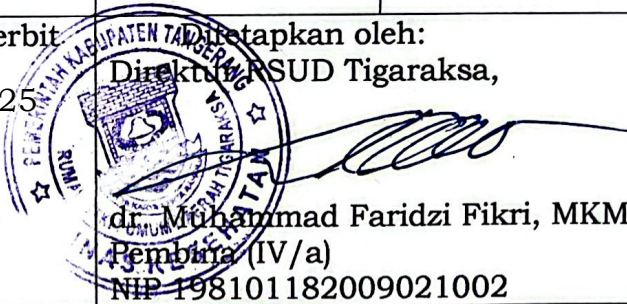
 RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	PENGUNAAN VENTILATOR		
	No. Dokumen	Revisi	Halaman
	400.7.5.6/191/ BidNonmed/ rsudtgrs	-0-	1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit ditetapkan oleh: 23 Sept 2025 Direktur RSUD Tigaraksa,  dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM Pembina (IV/a) NIP 198101182009021002		
Pengertian	1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis ventilator secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis ventilator adalah alat yang membantu proses pernapasan pasien yang mengalami gagal napas		
Tujuan	1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis ventilator 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis ventilator dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut		
Kebijakan	1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik		
Prosedur	1. Hubungkan kabel power ventilator ke stop kontak PLN 2. Hubungkan kabel power humidifier ke stop kontak PLN 3. Pasang selang oksigen ke oksigen outlet wall outelet gass 4. Hidupkan compressor dengan menekan tombol ON/OFF 5. Pastikan humidifier sudah terisi sesuai batas minimum/maksimum kapasitas chamber 6. Pasang breathing circuit berikut aksesorisnya seperti flow sensor, water trap, heater wire, dan temperature probe. Pastikan pemasangannya kuat tidak ada yang longgar 7. Setelah dipastikan persiapan dari no 1-6 sudah dilakukan tekan tombol ON/OFF pada alat untuk menghidupkan alat 8. Ventilator harus di device check sebelum dipasang ke pasien, ikuti petunjuk pada layar untuk proses device check nya. 9. Apabila device check sudah "success" semua, alat siap digunakan 10. Pilih mode sesuai dengan kondisi pasien 11. Atur besaran angka pada mode yang dipilih 12. Tekan "start ventilation" untuk memulai ventilasi 13. Apabila ventilator sudah selesai digunakan tekan tombol ON/OFF pada ventilator untuk mematikan alat. 14. Apabila ventilator mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis		
Unit terkait	ICU, NICU		